

Permanganate Value

56I701220-1

Reagentia

Reagentia	Verpakkings-eenheid	Bestelnr.
Permanganate	Tablet / 100	515760BT
Permanganate	Tablet / 250	515761BT
Acidifying SE	Tablet / 100	515970BT

De volgende toebehoren zijn eveneens vereist.

Toebehoren	Verpakkingseenheid	Bestelnr.
Plastic beker, gegradueerd, 100 ml, met deksel	1 St.	385130A


Toepassingsbereik

- Koelwater


Aantekeningen

1. De kleur kan variëren afhankelijk van het monster en de testomstandigheden.
2. CTAB = Cetyl Trimethyl Bromide


Uitvoering van de bepaling Permanganaatwaarde test

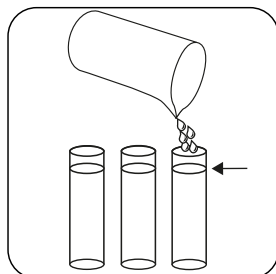


Vul drie reageerbuizen met het monster tot de grens van **100 mL**.

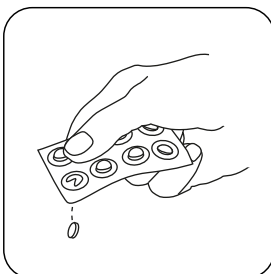


2 10 tabletten toevoegen. (In elke reageerbuis.)

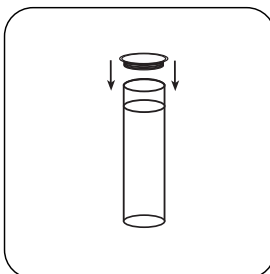


De spoelbakje(s) afsluiten.

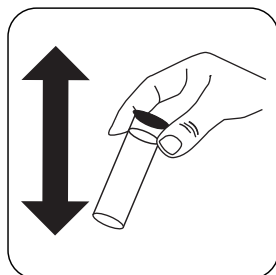


De inhoud mengen door te schudden.

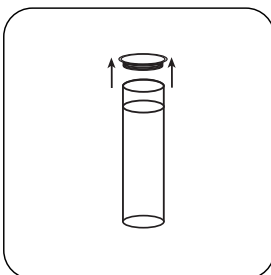


Open de reageerbuis(sen).

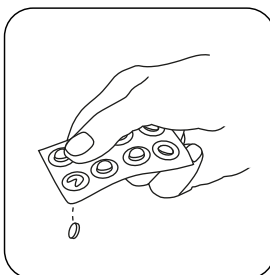


1 Permanganate Value tabletten toevoegen. (In de eerste reageerbuis.)

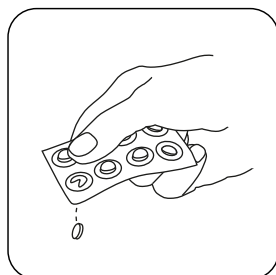


2 Permanganate Value tabletten toevoegen. (In de tweede reageerbuis.)

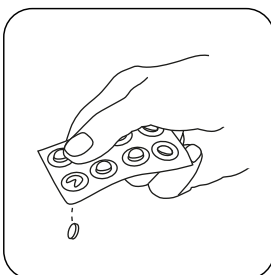


3 Permanganate Value tabletten toevoegen. (In de derde reageerbuis.)

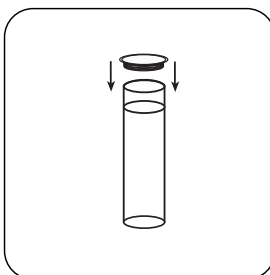

De spoelbakje(s) afsluiten.

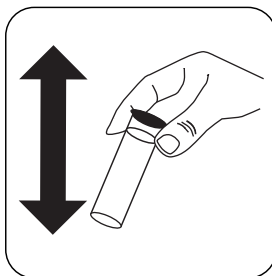

De inhoud mengen door te schudden.

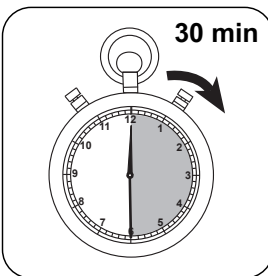

De reactietijd van 30 minuten afwachten.

Lees het testresultaat af: Let op de kleur van het monster (zie noten).